


Praktisk bruk av

▼ Mounjaro® KwikPen®

- 1 Pennen inneholder 4 doser, én dose per uke.
- 2 Nålespisser må kjøpes separat. Bruk alltid ny nålespiss til hver injeksjon.
- 3 Injeksjonen kan settes i lår, mage eller overarm.
- 4 Etter 4 doser vil det være noe overskuddsvæske igjen i pennen. Pennen, inkludert ubrukt legemiddel, skal da kastes.

Hvordan klargjøre, dosere og injisere

Klargjøring

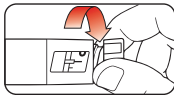

Sett på nålespissen.
Vri doseringsknappen til du hører 2 klikk og den forlengede streken vises i doseringsvinduet. Dette er klargjøringsposisjonen.



Trykk inn doseringsknappen til den stopper og du ser **10** tallet i doseringsvinduet.

Dosering og injisering



Vri doseringsknappen helt til du ser **11** tallet i doseringsvinduet. Dette tilsvarer en full dose. Du kan nå injisere dosen i mage, lår eller overarm. Du ser et **10** tall når injeksjonen er fullført.

Les alltid pakningsvedlegget før bruk. Scan QR-koden nedenfor for å se pakningsvedlegget med demonstrasjonsvideo og bruksanvisning.



Scan QR-koden for å se pakningsvedlegg